

CONTROLE QUALITE INTERNE

Panoramique dentaire

Le contrôle qualité trimestriel vise à vérifier que l'installation produit des images d'une qualité suffisante et constante tout en maîtrisant l'exposition aux rayonnements X.

Etape 1 Créer dans le logiciel de la panoramique ou votre logiciel de suivi de patientèle un patient dédié nommé : Contrôle Qualité Panoramique


Etape 2 Positionner la mire de contrôle qualité sur la mentonnière de la panoramique et la filtration en cuivre à la sortie du tube à rayons X.



Etape 3 Faire une exposition avec les paramètres d'acquisition habituels d'un adulte standard.

Critères d'acceptabilité :

Lire au minimum le groupe de 2.5 pl /mm pour la résolution spatiale

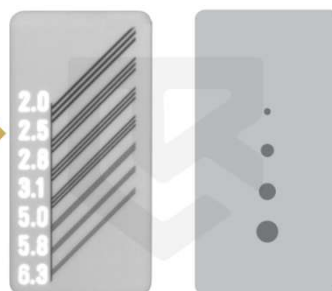

Lire les 4 trous pour la résolution à bas contraste

Etape 4 Renseigner la fiche OCRP contrôle qualité téléchargeable via notre site internet rubriques « nos ressources » et conserver ces résultats jusqu'au prochain audit annuel

Conseiller en Radioprotection

06 85 43 23 67
contact@ocrp-expertise.fr
www.ocrp-expertise.fr

