

CONTROLE QUALITE INTERNE


Rétroalvéolaires dentaire

Le contrôle qualité trimestriel vise à vérifier que l'installation produit des images d'une qualité suffisante et constante tout en maîtrisant l'exposition aux rayonnements X.

Etape 1 Créer dans le logiciel de suivi de patientèle un patient dédié nommé :

Contrôle Qualité Salle de soins 1,2...etc.

Etape 2 Positionner le capteur dans le logement de l'objet test prévu à cet effet.


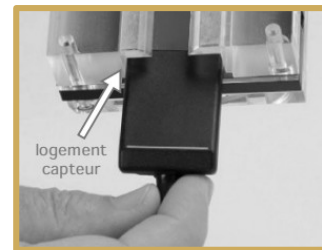


Etape 3 Faire une exposition avec les paramètres d'acquisition molaire supérieure en positionnant l'objet test sur la table veillez à bien centrer le générateur intra-oral.

Critères d'acceptabilité :

Lire au minimum le groupe de 5.0 pl /mm pour la résolution spatiale

Lire les 4 trous pour la résolution à bas contraste

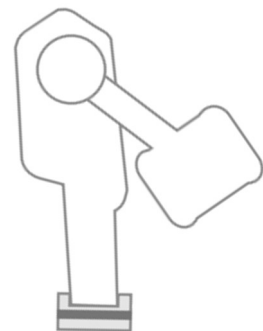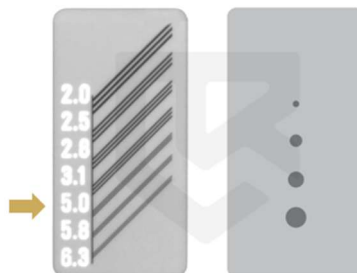

Etape 4 Renseigner la fiche OCRP contrôle qualité téléchargeable via notre site internet rubriques « nos ressources » et conserver ces résultats jusqu'au prochain audit annuel

Conseiller en Radioprotection

06 85 43 23 67
contact@ocrp-expertise.fr
www.ocrp-expertise.fr

